


Instruccions d'ús de l'Easyhaler®

Com es duu a terme la inhalació amb l'Easyhaler®?

Feu les maniobres següents tan relaxadament com pugueu, drets o asseguts:

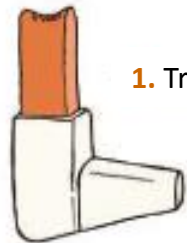

1. Traieu-ne el tap

2. Agiteu enèrgicament l'inhalador de 3 a 5 vegades



3 i 4. Manteniu l'inhalador en posició correcta (en forma de «L»). Pressioneu l'inhalador, sentireu un *clic*; deixeu que faci un altre *clic*



5. Traieu tant aire dels pulmons com pugueu



6. Aixequeu el cap i poseu-vos l'inhalador als llavis. Agafeu aire profundament i amb força



7. Reteniu l'aire dins els pulmons uns 10 segons o fins que pugueu



8. Expulseu l'aire lentament



9. Feu gàrgares i glopegeu en acabar



10. Poseu-hi el tap

L'inhalador té un comptador que mostra les dosis restants. El comptador gira cada 5 activacions. Quan els nombres són vermells queden 20 dosis.

Per a qualsevol dubte que tingueu, consulteu a la infermera.